



# Inmovilizador de muñeca corto regulable

CÓDIGO DE PRODUCTO: FIU

## FINALIDAD

Inmovilizar la articulación de la muñeca impidiendo la flexo-extensión en forma reforzada.

## USOS GENERALES

Recuperación de post operatorios, distensiones, artritis, artrosis, tendinitis, esguinces, síndrome de túnel carpiano, desgarros - cirugías, gangliones, dislocaciones, luxaciones, y fracturas. Alivia tensiones como también malestares. Brinda calor térmico y antiinflamatorio.

## INDICACIONES

Patologías articulares, post operatorios, e inflamaciones. Si lo desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Fracturas que requieran tratamiento quirúrgico o inmovilizar la totalidad de los movimientos de la muñeca. Alergia a alguno de los componentes de producto.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



## PRECAUCIONES

Lesiones por ajuste excesivo. Hipotrofias musculares por uso prolongado.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene 4 milímetros de espesor.

Incluye dos varillas de contención inmovilizadoras.

Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS



### TALLE ÚNICO

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos y la muñeca

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	PALMA	MUÑECA
Único	21/35 cm	19/34 cm

## INSTRUCCIONES DE USO




1. Acomodar el producto a la izquierda o derecha según la necesidad de recuperación. Ubicar la varilla curva en la palma y la plana en el dorso de la mano.



2. Posicionar la prenda desde la palma hasta el antebrazo.



3. Cerrar los abrojos inferiores y superior pasando entre el pulgar.

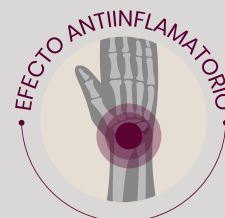

**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

